legholderrx

PRODUKTEÜBERSICHT 2025

BEINHALTER (FUSSSTÜTZE) FÜR DIE KNIECHIRURGIE

SWISS MADE SINCE 2000



THE "MUST" FOR SURGERY OF THE KNEE JOINT

endocon GmbH | In der Au 5 | 69257 Wiesenbach (Heidelberg) | Deutschland

Bestellhotline: +49 6223 7390 112 | F: +49 6223 7390 199
Bestellungen: order@endocon.de | E: info@endocon.de

VORTEILE

- Ersetzt in Kombination mit einer lateralen Seitenstütze einen Assistenten
- Sechs verschiedene stabile Positionen
- Der Legholder bei Lieferung ist komplett zusammengebaut, einfache Montage mit Velcrogurten
- Keine Sterilisation erforderlich, kein Bedarf an zusätzlichen Verbrauchsmaterialien
- Röntgendurchlässig



Dies ist die beste Erfindung in der Orthopädie der letzten 20 Jahre.

Dr.med. Alois Lustenberger, Orthopädischer Chirurg, Gemeinschaftspraxis Orthomed, Schweiz


PRODUKTE 2025



LegholderRX® standard

Der in der Vergangenheit meistverkaufte Beinhalter LegholderRX® standard, zeichnet sich in der neuen überarbeiteten Ausführung durch eine stabilere Konstruktion, optimierte Polsterung mit seitlichen


Artikelnummer: LRX2020-02
GTIN Article: 7649994277024

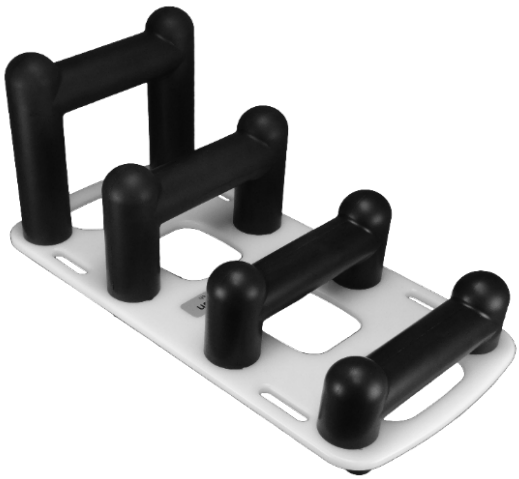


LegholderRX® fusion

Der neue LegholderRX® fusion hat halbkugelige Noppen seitlich an den Bügeln. Dies ermöglicht einerseits, dass das Tuch gut zwischen die Bügel hineingleiten und andererseits der Fuss nicht seitlich vom Bügel wegrutschen kann. Die Differenz der Bauhöhen zwischen den Bügeln ist leicht vergrössert, was eine bessere Stabilität gewährt.

Artikelnummer: LRX2024-03
GTIN Article: 7649994277055

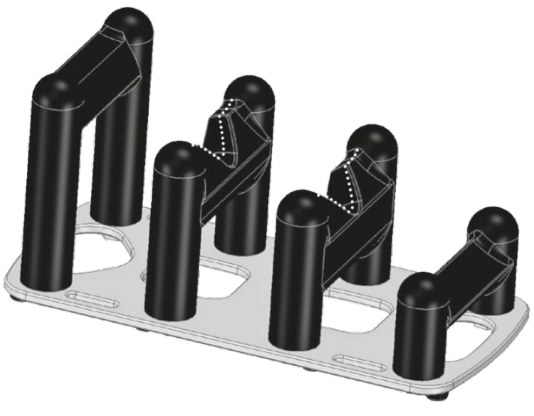

LegholderRX®
extra stable

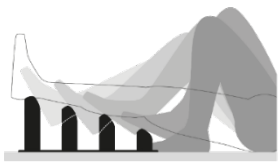

Sehr stabile Positionierung durch biometrisch berechnete und ergonomische Auflageflächen, vergrösserte Bauhöhe und Vertiefung für die Achillessehne beim 2. und 3. Bügel.

Artikelnummer: LRX2024-04
GTIN Article: 7649994277048



Die vergrösserte Bauhöhe kann durch Absenken des Beinteiles kompensiert werden.

***Jedes Produkt wird mit langen oder kurzen Velcrogurten geliefert.**

OPERATIONEN, DEM LEGHOLDERRX® EINFACHER DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN



Der LegholderRX® erlaubt die intraoperative stabile Lagerung des Kniegelenks in **sechs verschiedenen Beugestellungen**. Mit den Velcrogurten kann der LegholderRX® einfach direkt am Operationstisch unter der sterilen Abdeckung befestigt werden.

Als Positionierungshilfe ist der Legholder kombiniert mit einer Seitenstütze am Oberschenkel sehr hilfreich bei **offenen Knieoperationen wie Arthroplastiken, Osteotomien, Knorpelrekonstruktionen und der Patellachirurgie.**

Die Modelle sind nicht kaputt zu kriegen ... Mir persönlich gefällt die extra stabile Version sehr gut. Sie bietet zusätzliche Stabilität, vor allem für grössere und schwerere Patienten.

Prof.Dr.med.Niklaus Friederich, Universitätsspital Basel



NEUE VERBESSERTE VELCROGURTE

Die Velcrogurte haben einen praktischen Verriegelungsstab sowie eine integrierte Zeichnung in der Zuglasche zur richtigen Anwendung.



VERFÜGBAR IN ZWEI LÄNGEN

KURZE VELCROGURTE (S)

für die mehrheitlich vorhandenen Operationstische mit rechts und links getrennten und unabhängig voneinander bewegbaren Beinteilen.
Vorteil: Einfachere und stabilere Montage mit Bewegungsfreiheit der einzelnen Beinteile.
Artikel-Nr. LRX2020-10
Länge: 82 cm





LANGE VELCROGURTE (L)

eignen sich auch für Operationstische ohne getrennte Beinteile.

Artikel-Nr. LRX2020-11
Länge: 160 cm




TECHNISCHEN DATEN LEGHOLDER



Dimensionen	**490 x 240 x 200mm**
Gewicht	**3 kg, einschliesslich zwei robuste Velcrogurte (lange oder kurze Version).**
Spezifikationen	**Pflegeleichte, robuste, nicht allergene Kunststoffteile, röntgendurchlässig.**
Reinigung	**Muss nicht sterilisiert werden, inert gegen übliche Reinigungsmittel.**

legholderrx

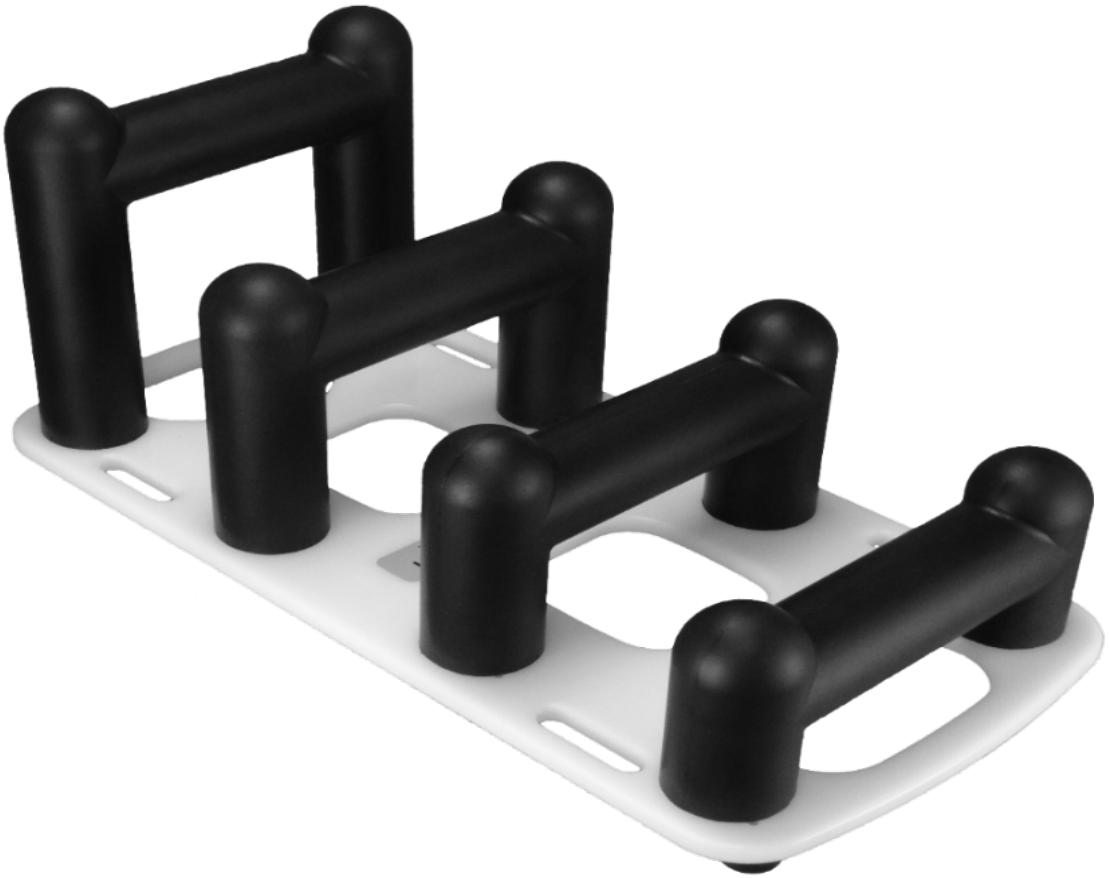

LegholderRX® mod. dép.
CE (Swissmedic CH-201505-0035) FDA registriert | GLN: 7649994277000

SWISS MADE SINCE 2000

endocon GmbH
MEDIZINTECHNIK
in der Au 5 | D-69257 Wiesenbach
(bei Heidelberg) **GERMANY**

Tel: **+49 6223 7390 10**
Fax: **+49 6223 7390 199**

info@endocon.de | www.endocon.de
Bestellungen: **order@endocon.de**